

28230
LÄTTA
WRIST ORTHOSIS



Användningsområden/Indikationer

Ger värme och stöd till handleden vid reumatologiska sjukdomar eller vid behov av avlastning.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av: Neoprene med en utsida av nylon. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.



Instruktion

1. Sätt hålet runt tummen. Den gröna ytan skall vara mot huden.
2. Drag bandaget på handflatsidan i riktning mot lillfingeret. Drag runt handleden och fäst kardborrbandet.
3. Tvätta bandaget ofta för att undvika hudirritationer.

Anvendelsesområder/Indikationer

Giver varme og støtte til håndleddet ved reumatologiske sygdomme eller ved behov af aflastning.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis nogen former for irritation eller hudproblemer opstår, skal bandagen straks tages af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

28230 LET HÅNDED

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

Materialespecifikation

Bandagen er fremstillet af: Neoprene med en yderside af Nylon. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmere.

Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd i bandagen inden vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer skal du tage bandagen af og kontakte din bandagist, terapeut eller forhandler.



Instruktion

1. Anbring hullet ved tommelfingeren. Det grønne foer skal vende indmod huden.
2. Træk bandagen på håndfladesiden i retning mod lillefingeren. Træk rundt om håndleddet og fæstn velcrobåndet.
3. Vask bandagen ofte for at undgå hudirritation.

Käyttöalueet/indikaatiot

Lämmittää ja tukee rannetta reumatologisissa sairauksissa tai keventää kuormitusta.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Tuki on valmistettu neopreenista. Ulkopuoli on nailonia. Tuote ei ole tulenkestävä.

Pesuohteet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Pese koneessa 40°C:ssa. Tasokuivaus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti.

Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.



Sovitusohjeet

1. Aseta peukalo reikään. Vihreä puoli tulee ihoa vasten.
2. Vedä tuki kämmenselänpuolella pikkusormea päin. Vedä ranteen ympäri ja sulje tarra.
3. Pese tuki usein ettei ihonärsytystä esiintyisi.

28230 LETT HÅNDEDD

Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk!

Bruksområder/ Indikasjoner

Gir varme og støtte til håndleddet ved revmatologiske sykdommer eller ved behov for avlastning.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun utføres av helsefaglig, kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes til for hardt. Ta straks av ortosen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Ortosen er laget av: Neoprene med en ytterside av nylon. Produktet er ikke beskyttet med flammehindrende materiale.

Vaskeinstruksjon

Lukk alle borrelåsene før vask. Bruk vaskepose. Maskinvaskes i 40°C. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Ved spørsmål

Om det oppstår noen problemer, ta av ortosen og kontakt utprøveren eller stedet du kjøpte ortosen.




Instruksjon

1. Stikk tommelen i hullet. Den grønne siden skal være mot huden.
2. Dra ortosen på håndflatesiden mot iliefingeren.
Dra rundt håndleddet og fest borrelåsen.
3. Vask ortosen ofte for å unngå hudirritasjoner.



Art. No	Description	L/R	Size
28230 0000	Lätta Wrist	Bilateral	One size

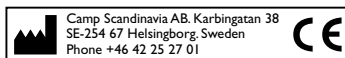

SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com